

CareFreeSleep®

CPAP Schlauchhaltersysteme für einen unbeschwerten erholsamen Schlaf

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer CareFreeSleep®
CPAP Schlauchhaltersysteme entschieden haben!

Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Dieser CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter wurde mit größter Sorgfalt
in Handarbeit hergestellt um dazu beizutragen, dass Sie mit einem
Gefühl von Sicherheit einschlafen, ohne sich Sorgen um den
unkontrollierten Verlauf des CPAP Atemschlauches machen zu müssen.

Damit Sie auch lange Freude daran haben, lesen Sie die
Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch und beachten Sie alle
Hinweise, um die bestmögliche Funktion des Gerätes zu erreichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen einen
unbeschwerten, gesunden und erholsamen Schlaf.

Ihr CareFreeSleep Team

Montageanleitung CareFreeSleep® Basic

Lieferumfang:

- 1). Schwenkarm
- 2). 2 Schlauchhaltehaken für 15 bzw. 22 mm Schlauchsystem
- 3). Aufnahmerohr mit Markierungen, Hinweisen und vormontiertem Auflagestift
- 4). 2 Linsenkopfschrauben 3 x 25 mm für die Montage am Bettrahmen/Kopfteil
- 5). 2 Linsenkopfschrauben 3 x 35 mm mit Kunststoffdübel für die Montage an der Wand

Schritt 1 von 4



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Messen Sie die Liegehöhe Ihres Bettes vom Fußboden bis zur Oberkante der Matratze (Bild 1) und übertragen Sie das ermittelte Maß auf die Montagefläche (Bild 2).

Wichtig! Um die bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu erreichen, montieren Sie das Gerät im Bereich des Bettkopfteils in einem Abstand von 30 cm von der Außenkante des Bettes entfernt, an dem sich das Therapiegerät befindet (Bild 3).

Bitte beachten Sie dazu auch die Montagezeichnung auf Seite 2.

Schritt 2 von 4



Bild 4

Bild 5

Bild 6

Befestigen Sie das Aufnahmerohr mit zwei mitgelieferten Linsenkopfschrauben senkrecht auf der Montagefläche (Bild 4). Achten Sie dabei auf den Hinweis "Unten" und dass die rote Markierung "Matratzenhöhe" mit dem zuvor übertragenen Maß übereinstimmt (Bild 5).

Achtung! Ziehen Sie die Schrauben von Hand nur leicht an um eine Deformation des Aufnahmerohrs zu vermeiden und damit die schwenkbare Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters nicht beeinträchtigt wird.

Führen Sie den Schwenkarm in das Aufnahmerohr (Bild 6).

Schritt 3 von 4



Bild 7

Bild 8

Bild 9

Wählen und montieren Sie für Ihren Atemschlauch den passenden Schlauchhaltehaken an den Schwenkarm (Bild 7) und klippen Sie den Atemschlauch in den Schlauchhaltehaken (Bild 8). Achten Sie dabei auf die Länge des Atemschlauches vom Schlauchhaltehaken bis zur CPAP Maske (Bild 9).

Wichtig! Um die bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu gewährleisten, muss der Außendurchmesser des Atemschlauches mit dem Innendurchmesser des Schlauchhaltehakens übereinstimmen.

Schritt 4 von 4

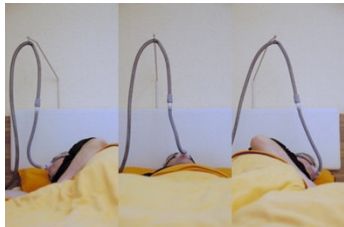


Bild 10

Prüfen Sie nun den aufgebauten CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter auf Funktion. Die Länge des Atemschlauches sollte für den Schwenkbereich des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters ausreichend vorhanden sein und vom Schlauchhaltehaken bis zur Atemmaske unverändert bleiben (Bild 10).

Wichtig! Sollte die Länge des Atemschlauches nicht ausreichen, positionieren Sie das Therapiegerät so, dass der Verlauf des Atemschlauches idealerweise dem auf der Montagezeichnung auf Seite 2 entspricht.


Optional:

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit Ihren CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter in der Höhe individuell anzupassen (Standardauslieferung in der höchsten Position).

Entfernen Sie dazu den vormontierten Auflagestift aus dem Aufnahmerohr. Dabei rutscht der Schwenkarm mit dem vormontierten Schlauchhaltehaken auf ein vorbestimmtes Maß nach unten und die Befestigungsschraube übernimmt die Rolle des Auflagestiftes.



Montagezeichnung

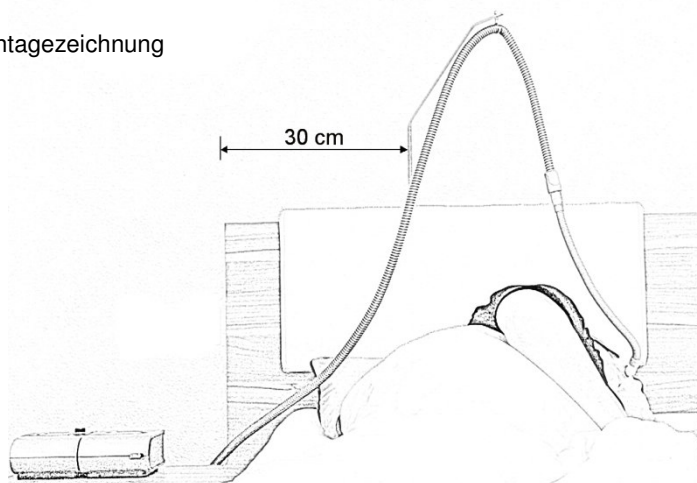

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 3

Wichtige Hinweise:

Bitte benutzen Sie den CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter ausschließlich nur für den dazu bestimmten Zweck.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für Schäden und Fehlfunktionen, welche infolge einer falschen Montage, unsachgemäße Bedienung, eigenwillige Abänderung oder durch zweckfremden Einsatz unseres Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der AGB auf unserer Homepage.

Sollten Sie noch Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

CareFreeSleep

Viktor Lamparter

info@carefreesleep.com

Tel.: 0163 - 1646749 (Täglich ab 17:00 Uhr, außer Sonn- und Feiertage)

www.carefreesleep.com